

Astraia - Babyconnect interface

versie 1.4.0

De interface bestaat uit twee losstaande onderdelen:

- delen van casuïstieke gegevens
- inzage van casuïstieke gegevens

Astraia sluit met een speciale convertor interface aan bij het Geboortezorgnetwerk. U blijft in controle welke gegevens gedeeld kunnen worden via intrekbare consent, eenvoudig in astraia.

Delen

Voor het delen van gegevens met het geboortezorgnetwerk is een speciale interface ontwikkeld door SorgSaem Nederland en ZWConnect.


Vorbereiding tot delen

Ter voorbereiding zal SorgSaem Nederland contact met u opnemen over installatie en gebruik van de interface. SorgSaem heeft nodig:

- AGB code van de praktijk
- uw voorkeur voor het beschikbaar stellen van gegevens (handmatig valideren of automatisch bij opslaan)

U moet astraia deels zelf configureren:

- In astraia vult u in het veld onderzoekerscode de AGB of BIG codes in van alle medewerkers die toegang hebben tot dossiers

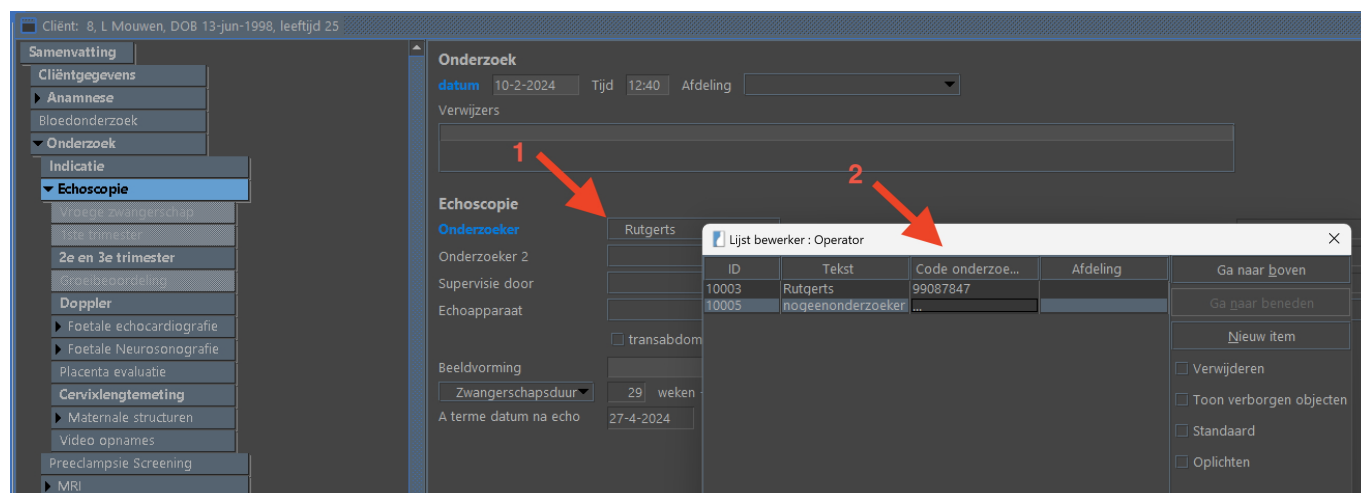

Gebruik automatisch-delen-koppeling in de praktijk

U kiest voor automatisch delen met het geboortezorgnetwerk. Tijdens het onderzoek moet u eenmalig per cliënte de consent invullen. Dit vindt u onderaan het cliëntgegevens scherm. Dit consent-veld vult u slechts

eenmalig in per cliënte.

The screenshot shows the Astraia software interface for a patient named '8, L Mouwen, DOB 13-jun-1998, leeftijd 25'. The left sidebar contains a menu with 'Samenvatting' and 'Cliëntgegevens' (highlighted with a red arrow). Under 'Cliëntgegevens', there are sub-items like 'Anamnese', 'Bloedonderzoek', 'Onderzoek', 'Indicatie', 'Echoscopie', 'Vroege zwangerschap', '1ste trimester', '2e en 3e trimester', 'Groenbeoordeling', 'Doppler', 'Foetale echocardiografie', 'Foetale Neurosonografie', 'Placenta evaluatie', and 'Cervixlengtemeting'. The main area displays patient details: 'Verzekering' (Particulier, 9991, Verzekeraar Noord), 'Huisarts', 'Verloskundige', 'Partner' (Name, Birth date, Profession, Ethnic background, Telephone), and 'Opmerkingen'. At the bottom, there is a 'Consent' section with a checkbox 'Zwangere geeft toestemming om gegevens met verwijzers te delen via het Geboortezorgnetwerk' (checked) and a date '12-2-2025' (highlighted with a red arrow). The bottom status bar shows function keys: F1 - hulp, F2 - samenvatting, F3 - navigator, F4 - vergroot scherm, F5 - Overzicht, F7 - curve, F8 - alle curven, F9 - metingen, F10 - beëindigen.

[!TIP] Dubbelklik op de datum om deze snel te vullen met de datum van vandaag.

u vervolgt uw onderzoek zoals gewoonlijk. Na afloop drukt u op opslaan en zal astraia automatisch een pdf afdrukken voor het geboortezorgnetwerk. Dit pdf is het compleet obstetrisch onderzoek verslag. Bij de eerste trimester SEO is dit automatisch het eerste trimester SEO verslag.

U bent klaar. Het dossier is opgeslagen in astraia en wordt binnen 5 minuten gesynchroniseerd naar de cloud. De gegevens zijn per direct inzichtelijk voor alle collega's wie betrokken zijn bij deze zwangerschap.

Mocht u niet willen dat de gegevens elke keer tijdens het opslaan automatisch worden verstuurd, dan zijn er ook alternatieven mogelijk. Wij passen ons graag aan jullie werkproces aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inzage

U kunt zelf ook dossiers inkijken van uw collega's die aangesloten zijn bij het Geboortezorgnetwerk. Deze interface is ontwikkeld door Hinq en SorgSaem Nederland.

Vorbereiding tot inzage

U neemt contact op met UZI voor het aanvragen van een server-certificaat (<https://www.uziregister.nl/servercertificaat>). Het aanvragen van een server-certificaat kan enigszins technisch uitdagend zijn. Uw IT helpdesk kan u hier mogelijk bij assisteren. Uw IT helpdesk en UZI brengen mogelijk kosten in rekening voor deze diensten. Mogelijk komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten binnen het VIPP Babyconnect programma. Neem contact op met uw contactpersoon binnen uw Geboortezorgnetwerk voor meer informatie.

[!WARNING] Een nieuwe aanvraag kan enige weken in beslag nemen. Houdt hier rekening mee bij uw planning.

SorgSaem zal de configuratie van Astraia op zich nemen en samen met Hinq een vertrouwde koppeling opzetten.


Gebruik inzage-koppeling in de praktijk

Om de koppeling tot inzage te gebruiken is het belangrijk dat een gebruiker aan twee eisen voldoet.

- De gebruiker moet het recht **Kan kijken in geboortezorgnetwerk** groepspermissie hebben;
- en de gebruiker moet het eigen profiel aanvullen met identificeerbare gegevens. Zie deze stappen hieronder toegelicht.

Nieuwe gebruiker toegang verlenen tot het Geboortezorgnetwerk (Uit te voeren voor beheerder)

Alle gebruikers in astraia horen bij een groep. Standaard is dat de groep 'Operator'. Een administrator kan in astraia - **opties** - **groepen** beheren welke groepen toegang hebben tot het geboortezorgnetwerk. Dat kan door een groep te bewerken en de permissie **Kan kijken in geboortezorgnetwerk** aan te vinken

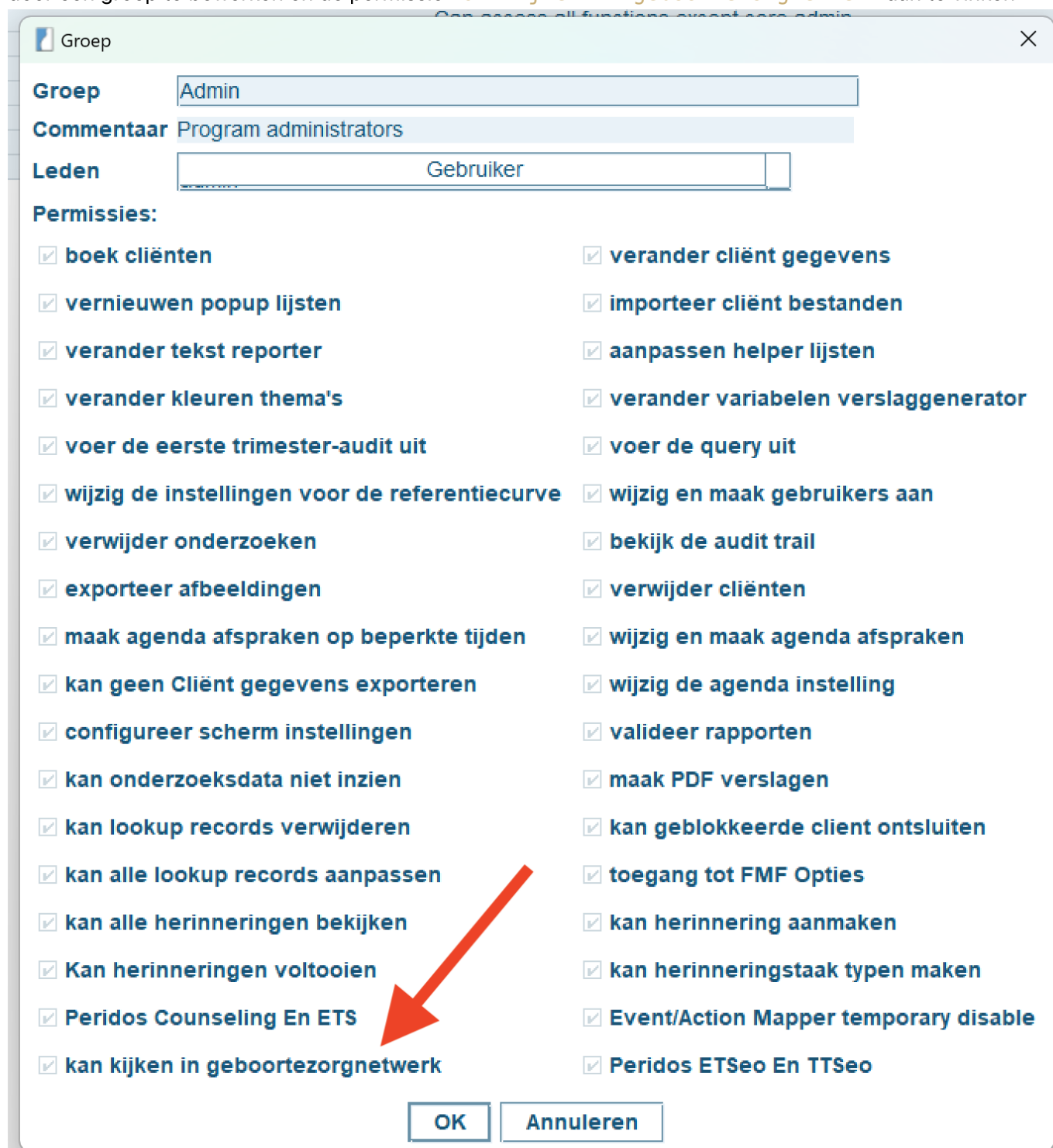

Groep Admin

Commentaar Program administrators

Leden Gebruiker


Permissies:

☒ boek cliënten	☒ verander cliënt gegevens
☒ vernieuwen popup lijsten	☒ importeer cliënt bestanden
☒ verander tekst reporter	☒ aanpassen helper lijsten
☒ verander kleuren thema's	☒ verander variabelen verslaggenerator
☒ voer de eerste trimester-audit uit	☒ voer de query uit
☒ wijzig de instellingen voor de referentiecurve	☒ wijzig en maak gebruikers aan
☒ verwijder onderzoeken	☒ bekijk de audit trail
☒ exporteer afbeeldingen	☒ verwijder cliënten
☒ maak agenda afspraken op beperkte tijden	☒ wijzig en maak agenda afspraken
☒ kan geen Cliënt gegevens exporteren	☒ wijzig de agenda instelling
☒ configureer scherm instellingen	☒ valideer rapporten
☒ kan onderzoeksdata niet inzien	☒ maak PDF verslagen
☒ kan lookup records verwijderen	☒ kan geblokkeerde client ontsluiten
☒ kan alle lookup records aanpassen	☒ toegang tot FMF Opties
☒ kan alle herinneringen bekijken	☒ kan herinnering aanmaken
☒ Kan herinneringen voltooien	☒ kan herinneringstaak typen maken
☒ Peridos Counseling En ETS	☒ Event/Action Mapper temporary disable
☒ kan kijken in geboortezorgnetwerk	☒ Peridos ETSeo En TTSeo

OK **Annuleren**

Gebruikersgegevens aanvullen voor toegang tot het Geboortezorgnetwerk (Uit te voeren door gebruikers zelf)

Nieuwe astraia gebruikers die toegang willen krijgen tot het Geboortezorgnetwerk moeten eenmalig hun agb/big/uzi nummer en naam + email toevoegen aan hun gebruikersaccount. Dit is relatief eenvoudig zelf te doen in astraia - opties - gebruikers.

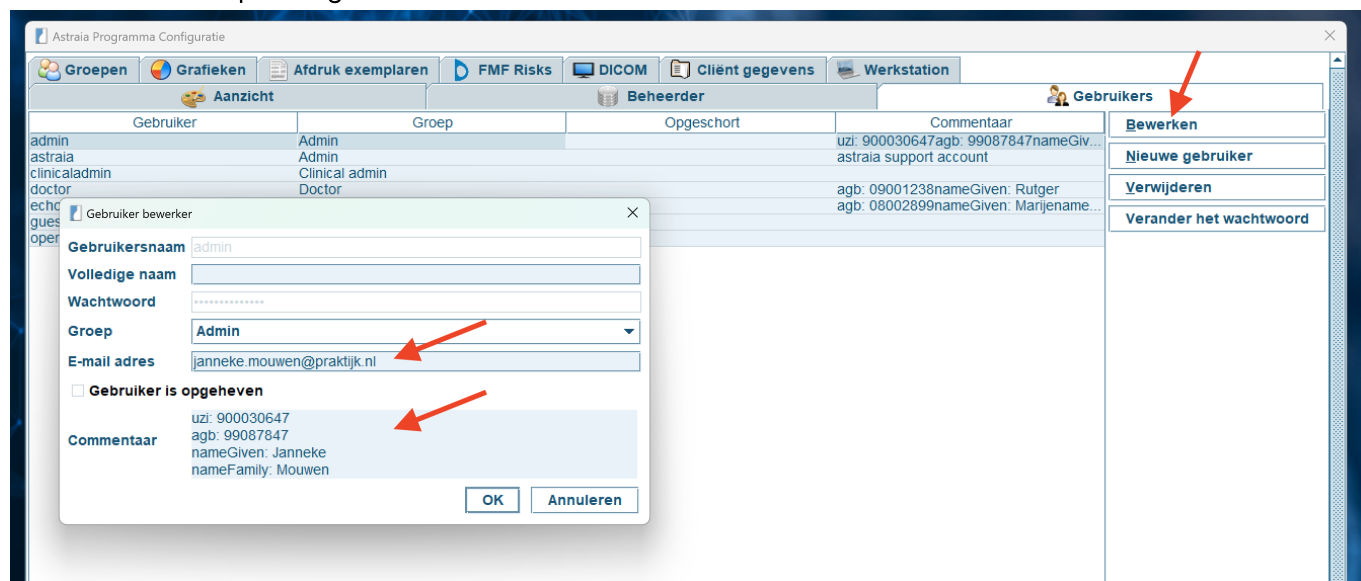


Bij het commentaar-veld luistert de manier van invullen érg nauw. Het moet altijd op de letter precies zijn in het volgende format:

```
uzi: 123456
agb: 123456
big: 123456
nameGiven: voornaam
nameFamily: achternaam
```

nameGiven en nameFamily zijn verplicht, van uzi, agb of big is slechts 1 vereist en kunt u de overige regels weglaten.

Inloggen bij Hinq-viewer

U start in een cliëntendossier in Astraia. Bovenaan het scherm ziet u een nieuw menu: "Event/Action Mapper" - "Open in Hinq-viewer".

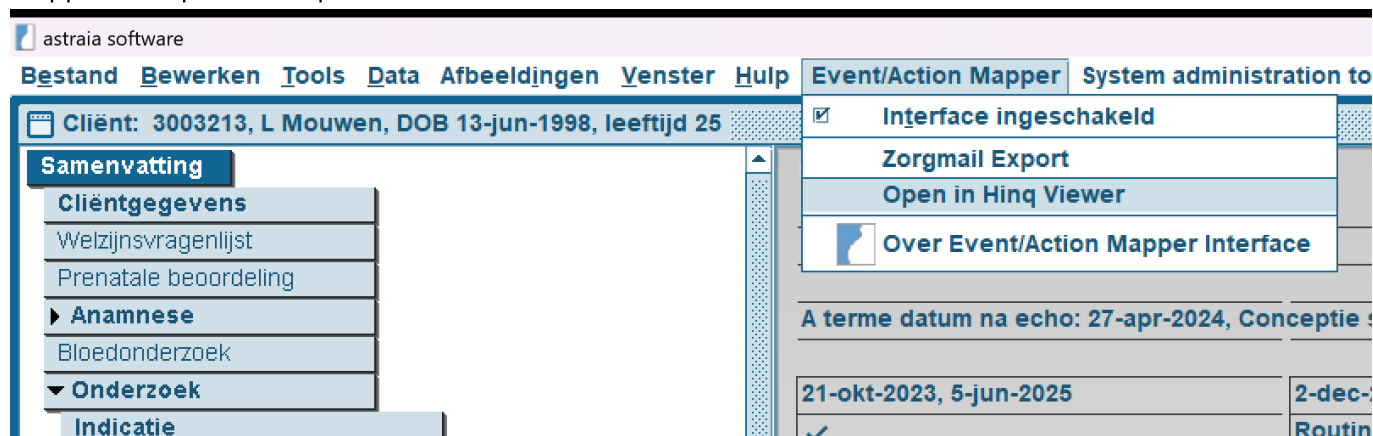

Mogelijk worden u eenmalig extra vragen gesteld worden zoals uw email adres. Hinq slaat deze op en verbindt dit adres aan uw AGB code.

U wordt direct doorgestuurd naar de Hinq-viewer.

